

# Contour next link 24

Draadloze bloedglucosemeter

Gebruikt uitsluitend CONTOUR®NEXT-bloedglucosestrips




ASCENSIA Diabetes Care

Medtronic

KORTE HANDLEIDING

## Meter

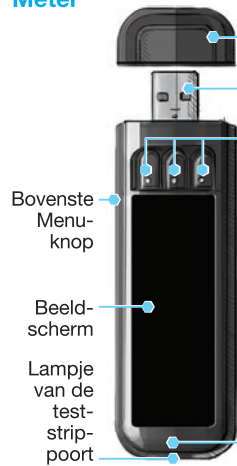

## Pomp



**OPMERKING: Controleer de meeteenheden van uw meter. Voor volledige instructies kunt u de handleiding van uw meter raadplegen.**

90004267 Rev. 07/19

## Begininstelling van uw meter en verbinding met de MiniMed™ 640G-insulinepomp

### De meter opladen

- 1 Verwijder de USB-dop om de USB-connector te zien.



Uw CONTOUR®NEXT LINK 2.4 meter heeft een oplaadbare batterij.

Laad uw meter op met de stopcontactlader\* of door de USB-connector op een computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat de computer aan staat.

Uw meter zal kort "Niet testen-Batterij laadt op" tonen en het lampje van de teststrip-poort zal flikkeren. **U kunt geen bloedglucosetest uitvoeren terwijl de batterij wordt opgeladen.**

Wanneer het opladen klaar is zal het lampje van de teststrip-poort uitgaan. Ontkoppel uw CONTOUR NEXT LINK 2.4-meter om te testen.

### Koppel de meter los van de oplaadbron alvorens te beginnen met de instelling

- 2 Om met het instellen te beginnen, houdt u de Menuknop op de bovenkant een paar seconden ingedrukt tot de meter wordt ingeschakeld.



- 3 Scrol naar beneden om uw taal te selecteren. Druk op **OK**.



Dit schermvoorbeeld toont de taalkeuzes. De taalvolgorde kan verschillen afhankelijk van uw land.


- 4 Druk op **OK** als de juiste taal wordt getoond. Druk op **NEE** als de verkeerde taal wordt weergegeven.

### Aansluiten op de pomp

- 5 Verbinding maken met een MiniMed Pomp? Druk op **OK**.



- 6 Druk op **OK**.

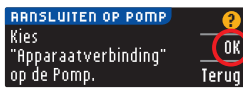

- 7 Leg de meter neer en pak uw pomp op.

Druk op een van de knoppen om het scherm in te schakelen en druk vervolgens op de menuknop.

Gebruik de pijl omlaag om naar **Extra's** te scrollen.


Druk op de knop **Kies**.



Als het scherm van de pomp uit gaat, drukt u op een van de knoppen om het weer in te schakelen.


- 8 Scrol in het hulpprogrammamenu met de pijl omlaag naar **Apparaatopties**.

Druk op de knop **Kies**.

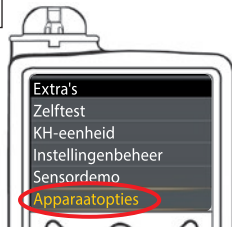


- 9 Scrol in het menu Apparaatopties naar **Apparaatverbinding**.

Druk op de knop **Kies**.

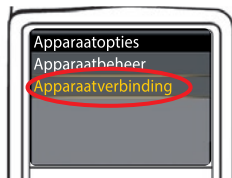


- 10 Plaats de meter en de pomp naast elkaar.

Selecteer **Automatisch verbinden** op uw pomp.

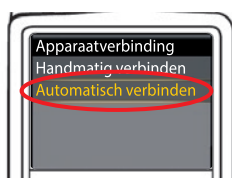

Selecteer **Automatisch verbinden** op uw meter.

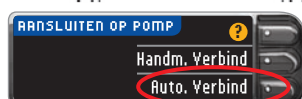

- 11 Lees het scherm van de pomp en gebruik de pijl omlaag om naar de volgende pagina te scrollen.

Gebruik de pijlknoppen om naar **Doorgaan** te scrollen.

Druk op de knop **Kies**.




- 12 Plaats de meter en de pomp naast elkaar.

Selecteer **Zoeken** op de pomp.



Selecteer **zoek** op de meter.

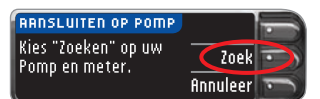


Het zoeken kan tot 2 minuten duren.



- 13 Controleer of het Apparaat SN (serienummer) op de pomp overeenkomt met het serienummer op de meter.

Als ze met elkaar overeenkomen scrollt u naar **Bevestigen** op de pomp.

Druk op de knop **Kies**.

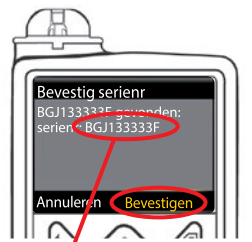

Als de pomp verbinding maakt met de meter, verandert het serienummer op het scherm van de meter in een ander serienummer. Dit nummer is het serienummer van de pomp.


- 14 Keer de pomp om.

Controleer of het serienummer op de achterkant van de pomp overeenkomt met het pompserienummer dat nu wordt weergegeven op het scherm van de meter.

Druk op **Volgende**.



- 15 Selecteer **Altijd** en druk op **OK** op het volgende scherm.

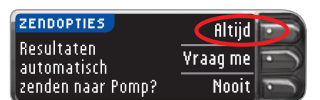


- 16 Selecteer de **Datum Notatie**.




- 17 Druk op **OK**.

Opmerking: Als de tijd en datum niet juist zijn, moet u deze op de pomp wijzigen.

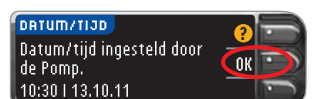

- 18 Druk op **Accepteren** om **AutoLog Uit.** te selecteren.

Met AutoLog kunt u een testresultaat markeren als **Nuchter**, **Voor Eten** of **Na Eten**. Raadpleeg uw handleiding om meer te weten te komen.

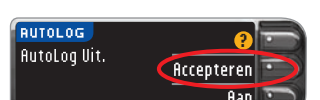

\*Niet alle startpakketten bevatten een stopcontactlader. Neem contact op met de Klantenservice voor informatie over het verkrijgen van een stopcontactlader.

- 19** **Accepteren of Wijzig Signalen**  
Hoge en Lage Grens.  
De meter waarschuwt u met een geluid wanneer uw bloedglucosenuiveau hoger of lager dan de ingestelde niveaus is.



- 20** **Accepteren of Wijzig uw doelwaardenbereik.**  
Het doelwaardenbereik is uw doel voor uw bloedglucosetestresultaten.



**OPMERKING:** De alarmsignalen kunnen alleen buiten uw gekozen doelwaardenbereik(en) worden ingesteld. De doelwaarden kunnen alleen binnen uw gekozen waarschuwniveau(s) worden ingesteld. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Zie hieronder de contactgegevens van de Klantenservice.

- 21** Uw systeem is nu ingesteld en klaar om een bloedglucosetest uit te voeren.  
Ga hieronder naar stap 1.

Instellingen is klaar. Voer strip in om test uit te voeren.

## Materialen voor het testen



CONTOUR®NEXT-teststrip



Prikapparaat



Lancet



CONTOUR®NEXT LINK 2.4 bloedglucosemeter


### ! WAARSCHUWING:

- Het prikapparaat is bestemd voor zelftesten door één patiënt. Het mag vanwege infectierisico niet door meer dan één persoon worden gebruikt.<sup>1,2</sup>
  - Gebruik een nieuw lancet telkens wanneer u test, omdat het na gebruik niet meer steriel is.
  - Alle onderdelen van de set worden beschouwd als biologisch gevaarlijk en kunnen mogelijk besmettelijke ziekten overdragen, zelfs nadat u ze gereinigd en gedesinfecteerd hebt.
  - Was altijd uw handen goed met water en zeep en droog ze goed af vóór en na het testen en bij het gebruik van de meter, het prikapparaat of de teststrips.
- Voor volledige instructies voor het reinigen van uw meter kunt u de handleiding van uw meter raadplegen.


## Uw bloed testen

### Een bloeddruppel verkrijgen

- 1** Steek de teststrip in de meter en wacht tot u het bericht **BLOED AANBRENGEN** ziet.

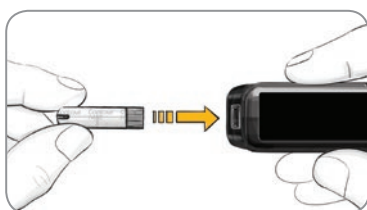

- 2** Verwijder de punctiedop van uw prikapparaat. Druk het lancet stevig in het prikapparaat tot het niet verder kan.

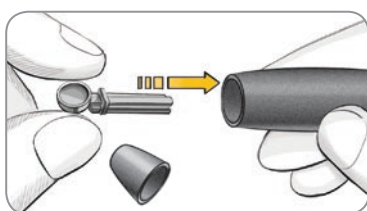


De afbeeldingen van het prikapparaat dienen uitsluitend ter illustratie. Uw prikapparaat ziet er mogelijk anders uit. Raadpleeg de bijsluiter van uw prikapparaat voor uitgebreide instructies voor het gebruik van het prikapparaat.

- 3** Plaats de punctiedop terug. Draai de draaiknop van de punctiedop om de diepte van de prik in te stellen.




- 4** Verkrijg uw bloeddruppel.

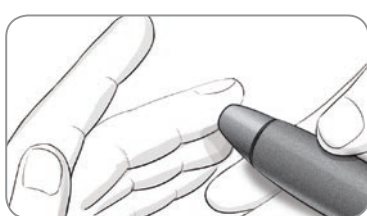

### Een bloeddruppel testen

- 5** Houd het uiteinde van de teststrip in de bloeddruppel. Als de eerste bloeddruppel niet voldoende is, laat de meter twee pieptonen horen en het bericht **STRIP ONVOLDENDE GEVULD** op het scherm tonen. U hebt ongeveer 30 seconden om meer bloed aan te brengen op dezelfde teststrip.

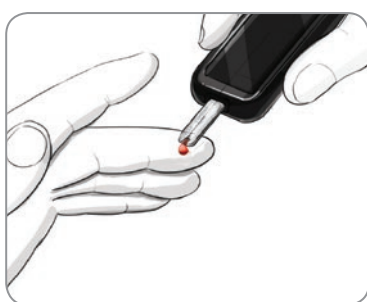

### Resultaten naar uw MiniMed-pomp sturen

- 6** Als **Altijd** werd gekozen bij **Zendopties** tijdens de **Instelling**, worden de resultaten direct naar uw pomp gezonden. Als **Vraag me** werd gekozen bij **Zendopties** tijdens de **Instelling**, kunt u na elke bloedglucosetest kiezen om uw resultaat naar uw pomp te verzenden.



Druk op **Verzenden** of op **Niet Verzenden**.

**VOORZICHTIG:** Controleer altijd het beeldscherm op uw pomp om te garanderen dat het getoonde glucoseresultaat overeenkomt met het op de meter getoonde glucoseresultaat.

### Bolus, Herinnering en Notities

- 7** Selecteer **Bolus** om een bolus naar uw pomp te sturen. Selecteer **Herinner** om een herinnering in te stellen voor uw volgende test. Selecteer **Notities** om meer informatie aan het resultaat toe te voegen.



### Bevestig dat het resultaat naar de pomp is gestuurd

- 8** Pak uw pomp op. Druk op de knop **Vorige** en houd deze ingedrukt om naar het beginscherm te gaan. Uw bloedglucoseresultaat wordt op het scherm van de pomp weergegeven.



### De meter uitzetten

- 9** Verwijder de teststrip en de meter zal binnen 3 minuten vanzelf worden uitgeschakeld. Of houd de menuknop ingedrukt om de meter uit te schakelen.



**OPMERKING:** Als **AutoLog AAN** is, wordt u, voordat uw resultaat wordt weergegeven, gevraagd uw resultaat te markeren als **Nuchter**, **Voor Eten** of **Na Eten**. Als uw resultaat boven de instelling **Hoge Grens** of onder de instelling **Lage Grens** ligt, ziet u uw resultaat zonder een **AutoLog**-selectie te hoeven maken.

### Referenties

- US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Zie uw CONTOUR NEXT LINK 2.4 handleiding, de bijsluiter van het prikapparaat en de handleiding van de MiniMed-insulinepomp voor volledige instructies.

De openingstijden van de klantenservice kunt u vinden op [www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)

Tel: 0800 235 22 937

Zie [www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com) voor informatie over octrooien en hieraan gerelateerde licenties.

**IVD** Bestemd voor in-vitro diagnostisch gebruik

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

**CE**  
2797

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Medtronic, the Medtronic logo, and MiniMed are trademarks of Medtronic.

**Medtronic**

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rechten voorbehouden.